

BRUMABA



Gesamtkatalog OP-Stühle und -Hocker

Ergonomischer Sitzkomfort und
konzentriertes Arbeiten

[brumaba.de](https://www.brumaba.de)

Willkommen bei BRUMABA

Zuverlässige Qualität für Ihre Gesundheit

BRUMABA ist ein familiengeführtes Unternehmen und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von ergonomischen OP-Tischen, -Stühlen und -Hockern spezialisiert: Mit unseren hochwertigen, innovativen Produkten möchten wir die Gesundheit und das Wohlbefinden von medizinischen Fachkräften und Patienten auf der ganzen Welt verbessern.

Der Grundsatz unserer Arbeit ist Nachhaltigkeit: BRUMABA Produkte werden bereits seit 1980 in unserer bayerischen Heimat im Süden Deutschlands hergestellt und leisten eine nachweislich lange Nutzungsdauer dank dem Einsatz hochwertiger Materialien und zuverlässiger Technik.

Überzeugen Sie sich selbst von unsere spürbaren Vorsprung an Ergonomie, Komfort und Effizienz.

Zuverlässigkeit, die zählt.

Stabilität, die hält.

BRUMABA - Ihr Partner in Qualität.

OP-Hocker Modell
COMFORT



MADE IN GERMANY



SINCE 1980



OP-Stuhl Modell
BALANCE



OP-Stuhl Modell
BALANCE ADVANCE

BRUMABA OP-Stühle und -Hocker

Für mehr Komfort im OP-Saal

Eine ergonomische Sitzhaltung ist für Chirurgen und medizinisches Fachpersonal nicht nur eine Frage des Komforts, sondern ein zentraler Aspekt der Berufsausübung. Gerade bei langen und anspruchsvollen Operationen fördert eine ergonomische Haltung die Durchblutung sowie Konzentration und reduziert Muskelverspannungen und Ermüdung.

BRUMABA Operationshocker- und -stühle lassen sich flexibel auf Ihre individuellen Körpermaße einstellen und bilden eine ideale Ergänzung zu unseren OP-Tischen. Durch die rückschonende Haltung wird die physische Belastung beim Operieren und Assistieren auf ein Minimum gesenkt – ein nachhaltiges Investment in Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Teams.

Ihre Vorteile:

- Optimale Rückenunterstützung durch stufenlos verstellbares Rückenteil
- Präzise verstellbare Armlehnen für perfekte Unterstützung während der Operation und Behandlung
- Patentierte ergonomische Sitzflächen für einen konsequent sicheren und komfortablen Sitz
- Individuell einstellbarer Neigungswinkel der Sitzfläche für eine gesunde Blutzirkulation in Ihren Beinen
- Sterile Arbeitsumgebung dank fußverstellbarer Sitzhöhe





Optimale Rückenunterstützung

Multifunktionale Armlehne

Ergonomische Sitzfläche

Venenfreundliches Sitzen

OP-Stuhl **BALANCE**

Form. Funktion. Ergonomie.

BALANCE F

Highlights

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenteile passen sich der natürlichen Körperform an
- Hochwertige Polster sorgen für komfortables und gesundes Sitzen
- Die ergonomische Sitzform fördert die Blutzirkulation in den Beinen und ermöglicht auch bei längerem Sitzen höchsten Komfort.
- Verschweißte Polster und geschlossene Räder erleichtern die Reinigung und sorgen für zuverlässige Hygiene
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



Höhenverstellung mit Fußauslösung, ideal bei sterilem Arbeiten

Technische Daten

Min. Höhe	500 mm
Max. Höhe	695 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

BALANCE F
ART. NR. S3.10.13.501.0

BALANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.501.0



Optional mit Bremse

BALANCE SUPREME F
ART. NR. S3.10.13.521.0

BALANCE SUPREME F & B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.521.0

BALANCE SUPREME F

Der BALANCE SUPREME verfügt über multifunktionale Armlehnen welche nach vorne und hinten geschwenkt werden können.

- Verstellbar in Höhe, Länge und zur Seite
- Polsterfarbe der Armlehne passend zur Sitzfläche wählbar

Technische Daten

Min. Höhe	520 mm
Max. Höhe	715 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

Mikrochirurgiestuhl **BALANCE ADVANCE**

Gesundes Sitzen ist Einstellungssache

In enger Zusammenarbeit mit Mikrochirurgen haben wir den OP-Stuhl BALANCE ADVANCE speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt.

Das Ergebnis: Bequemes Operieren bei perfekter Arbeitsposition.



Erhältlich mit und
ohne Bremsfunktion

BALANCE ADVANCE F
ART. NR. S3.10.13.5310

BALANCE ADVANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.5310

Dreidimensional
verstellbare Armlehnen



Unser Standard für ergonomisches Sitzen und Arbeiten

- Dreidimensional verstellbare, fixierbare Armlehnen für optimale Unterstützung der Schulter- und Armmuskulatur
- Komfortables Arbeiten auch bei langen Operationen
- Ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil mit Sitzneigung und hochwertigen Polstern sorgt für eine gesunde Sitzposition
- Einfache Höhenverstellung per Fußauslösung (Gasdruckfeder)
- Komfortfahrwerk samt antistatischer Rollen
- Nahtlose, geschlossene Polster und geschlossene Räder für hygienische Reinigung



Technische Daten

Min. Höhe	555 mm
Max. Höhe	745 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

Mikrochirurgiestuhl **THRONUS T3**

Sitzen Sie immer 1. Klasse

Da Sie einen Großteil Ihres Lebens im OP verbringen, ist exzellente Ausstattung keine Luxusfrage, sondern essentiell für Ihre Arbeit. Der THRONUS, in Zusammenarbeit mit Chirurgen für den profes-

sionellen Einsatz entwickelt, überzeugt in jedem Detail. Dieser hochwertige OP-Stuhl bietet eine intuitive Bedienung und außergewöhnlichen, ergonomisch perfektionierten Sitzkomfort.



Highlights

- Verstellbares Sitz- und Rückenteil für eine optimale Sitz- und Arbeitsposition
- Stabile multifunktionale Armlehnen, mit einer Hand intraoperativ verstellbar
- Stufenlose, elektrische Höhenverstellung per Fußauslöser mit zwei Memory-Positionen
- Nahtlose, geschlossene Polster sowie geschlossene Räder für maximale Hygiene
- Bremsaktivierung per Knopfdruck – mit LED-Anzeige für sicheren Stand
- Fühlbare, tiefe Standruhe durch das solide Eigengewicht
- 2 Akkus und Ladestation im Lieferumfang enthalten.
- Hochwertige Edelstahlverarbeitung

Technische Daten

Min. Höhe inkl. Polster	585 mm
Max. Höhe inkl. Polster	815 mm
Sitzpolster Länge	420 mm
Sitzpolster Breite	460 mm

THRONUS T3 ART. NR. T3.00.00



Fußschalterpodest THRONUS

- Zur Ablage externer Fußschalter (z.B. Mikroskop)
- Flexibel nach vorne ausziehbar und seitlich abspreizbar
- Leicht montierbar

ART. NR. Z1.219

OP-Hocker **COMFORT**

Der Allrounder

Der OP-Hocker COMFORT ist universal einsetzbar und eine ideale Ergänzung für jeden OP- und Behandlungsraum. Das OP-Personal kann durch den wendigen Hocker schnell und agil zuarbeiten. Die praktische Höhenverstellung per Fuß ermöglicht steriles Arbeiten.

Highlights

- Komfortable und nahtlose Sitzpolsterung für leichte Reinigung und zuverlässige Hygiene
- Das Fußkreuz verfügt über große, geschlossene, antistatische und damit auch hygienische Rollen
- Optional mit Bremse
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



Erhältlich auch mit
COMFORT SWING
Sitzpolster



Höhenverstellung mit
Fußauslösung, ideal bei
sterilem Arbeiten



Technische Daten COMFORT F

Min. Höhe	540 mm
Max. Höhe	735 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Durchmesser Sitzfläche	400 mm
Flexible Höhenverstellung	475 - 735 mm

Verfügbare COMFORT Modelle

COMFORT F

Höhenverstellung per
Fußauslösung

ART. NR. H3.10.11.100.0

COMFORT F/B

Höhenverstellung per
Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.11.100.0



Optional
mit Bremse

COMFORT SWING F

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Fußauslösung

ART. NR. H3.10.12.100.0

COMFORT SWING F/B

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.12.100.0



Höhenverstellung
mit Handauslöser

COMFORT H

Höhenverstellung per
Handauslösung

ART. NR. H3.10.31.100.0

COMFORT SWING H

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Handauslösung

ART. NR. H3.10.32.100.0

OP-Hocker **COMFORT ASSIST**

Ihre neue, komfortable Unterstützung im OP.

Der OP-Hocker COMFORT ASSIST ist die ideale Ergänzung für jeden OP- und Behandlungsraum. Die 360°-schwenkbare Lehne des Hockers sorgt für eine ergonomische Abstützung bei einer Vielzahl von Sitzpositionen und ermöglicht ein schnelles und agiles Zuarbeiten.

Highlights

- 360°-schwenkbare Lehne für eine ergonomische Abstützung

Technische Daten

Min. Höhe	540 mm
Max. Höhe	680 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Durchmesser Sitzfläche	400 mm

COMFORT ASSIST F
ART. NR. H3.10.41.103.0

Extra dick gepolsterte
Armlehne, 360° schwenkbar

Handauslöser für
die Höhenverstellung

5 Leichtlaufrollen,
eine davon
elektrisch leitend





Unsere BRUMABA OP-Stühle und -Hocker im Überblick



	COMFORT H	COMFORT F	COMFORT F&B	COMFORT ASSIST F
Artikelnummer	H3.10.31.100.0	H3.10.11.100.0	H3.11.11.100.0	H3.10.41.103.0
Stuhlkreuz ø mm	610	610	610	610
Stuhlhöhe mm	475-680	540-735	540-735	475-680
Höhenverstellung	Handauslöser	Fußauslöser	Fußauslöser	Fußauslöser
Bremse			•	
Sitzpolster rund (mm)	400	400	400	400

max. Belastung 120 kg

COMFORT SWING	COMFORT SWING H	COMFORT SWING F	COMFORT SWING F&B	
Artikelnummer	H3.10.32.100.0	H3.10.12.100.0	H3.11.12.100.0	
Stuhlhöhe mm	570-750	500-705	570-750	



	BALANCE F	BALANCE F&B
Artikelnummer	S3.10.13.501.0	S3.11.13.501.0
Stuhlkreuz ø mm	610	610
Stuhlhöhe mm	500-695	500-695
Höhenverstellung	Fußauslöser	Fußauslöser
Bremse		•
Sitzpolster BALANCE mm	460x420	460x420

max. Belastung 120 kg



	BALANCE ADVANCE F	BALANCE ADVANCE F&B
Artikelnummer	S3.10.13.531.0	S3.11.13.531.0
Stuhlkreuz ø mm	610	610
Stuhlhöhe mm	555-745	555-745
Höhenverstellung	Fußauslöser	Fußauslöser
Bremse		•
Sitzpolster BALANCE mm	460x420	460x420

max. Belastung 120 kg

SLIM LINE	BALANCE ADVANCE SLIM F	BALANCE ADVANCE SLIM F&B
Artikelnummer	S3.10.23.641.0	S3.12.23.641.0
Sitzpolster in mm	400x360	400x360
Stuhlhöhe mm	490-630	490-630

	BALANCE SUPREME F	BALANCE SUPREME F&B
Artikelnummer	S3.10.13.521.0	S3.11.13.521.0
Stuhlkreuz ø mm	610	610
Stuhlhöhe mm	520-715	520-715
Höhenverstellung	Fußauslöser	Fußauslöser
Bremse		•
Sitzpolster BALANCE mm	460x420	460x420

max. Belastung 120 kg



Individualität in 35+ starken Farben

Unsere Polster lassen keine Wünsche offen


Alle gezeigten Polsterfarben sind sowohl für OP-Liegen, -Hocker und -Stühle sowie Behandlungsliegen möglich. So fügen sich unsere BRUMABA-Produkte harmonisch in Ihre Räumlichkeiten ein.



← Elektrisch leitfähig

Dieses zwei Polster erfüllen alle notwendigen Standards für die Verwendung im Operationsaal.

Ein Produkt von
martistat

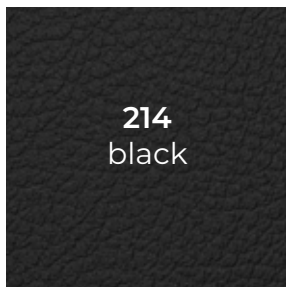




223
plain
brown



205
rosewood
brown

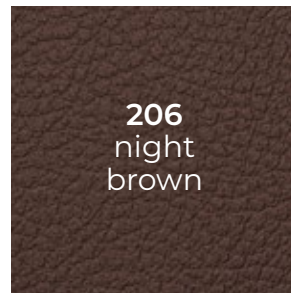

206
night
brown



203
bitter
orange



227
light
rose



225
emperor
cherry red



207
crimson
red



238
intense
purple



232
aubergine



211
royal
blue



210
alpine
blue



239
transparent
blue



234
ice crystal
blue



233
ice water
green




221
florida
turquoise



237
teal
dark blue




235
clear
turquoise

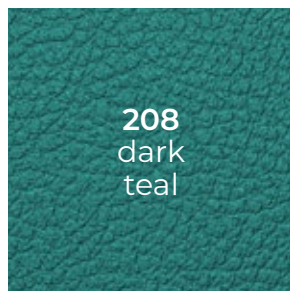

208
dark
teal




209
urban
green

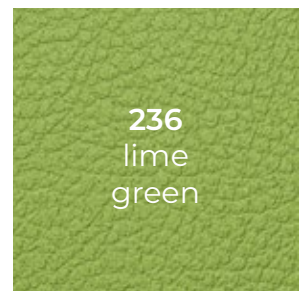

236
lime
green



222
summer
green

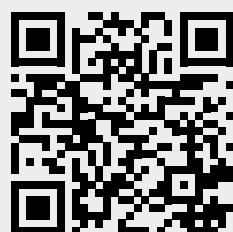

QR-Code
scannen und
weitere Infos
erhalten.



BRUMABA GmbH

Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried

Telefon: +49 (0) 8171 / 2672 - 0

E-Mail: info@brumaba.de

Änderungen vorbehalten.

© BRUMABA GmbH
KA.0012-2026-06-16-DE

www.brumaba.de

MADE IN GERMANY



SINCE 1980

BRUMABA